

Pończochy przeciwzakrzepowe

Okołooperacyjna profilaktyka powikłań zakrzepowych

Komfort i skuteczność

- Gradient kompresji efektywnie wspomagający przepływ krwi
- Precyzyjne wykonanie i zaawansowane materiały
- Wygoda noszenia



Termiczna
dekontaminacja w 95°C



Zapobieganie DVT i PE



Certyfikat OEKO-TEX®



Prewencja
zakażeń szpitalnych





Mechanizm działania Clotosis

Clotosis to kluczowy element profilaktyki przeciwzakrzepowej. Zastosowane w naszych pończochach zaawansowane materiały oraz precyzyjne wykonanie zapewniają komfort, bezpieczeństwo i skuteczność w zapobieganiu powikłaniom zakrzepowym.

Międzynarodowe wytyczne poparte licznymi dowodami naukowymi stały się niezaprzeczalną podstawą do rekomendacji włączenia przeciwzakrzepowych pończoch kompresyjnych (GCS – **Gr**aduated **C**ompression **S**tockings) do standardowych protokołów leczenia okołoperacyjnego oraz codziennej opieki nad pacjentami z ograniczoną mobilnością.



Termiczna dekontaminacja w 95°C

Stosowanie pończoch kompresyjnych jest związane z gromadzeniem się potu, zanieczyszczeń oraz martwych komórek skóry. Może to prowadzić do jej podrażnienia, dlatego zaleca się ich regularne pranie.

Clotosis daje możliwość prania w 95°C. Możliwość prania Clotosis w tak wysokiej temperaturze pozwala na skuteczne niszczenie bakterii, wirusów i grzybów, co zapobiega zakażeniom szpitalnym.

Infekcje szpitalne, takie jak MRSA (gronkowiec złocisty oporny na metycylinę), mogą być przenoszone przez zanieczyszczone tekstylia jednak pranie w 95°C zapobiega rozprzestrzenianiu się również tych uciążliwych patogenów.



Zapobieganie DVT* i PE**

Pończochy Clotosis wspomagają przepływ krwi żyłnej w kończynach dolnych, co jest kluczowe dla pacjentów z ograniczoną mobilnością. Badania wykazują, że stosowanie pończoch kompresyjnych znacząco redukuje ryzyko wystąpienia zakrzepów krwi oraz zatorowości płucnej, zgodnie z wytycznymi AAFP (American Academy of Family Physicians) oraz American Society of Hematology.

*deep vein thrombosis - zakrzepica żył głębokich

**pulmonary embolism - zatorowość płucna



Certyfikat OEKO-TEX®

Pończochy kompresyjne Clotosis z certyfikatem OEKO-TEX® STANDARD 100 są wolne od substancji szkodliwych dla zdrowia. Zastosowany materiał jest bezpieczny i przyjazny dla skóry, wolny od pestycydów, chlorofenoli, formaldehydów, alergizujących barwników, zabronione barwników azowych i ekstrahowalnych metali ciężkich.

Certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100 obejmuje również aspekty ekologiczne, co oznacza, że materiały używane do produkcji pończoch są wytwarzane w sposób przyjazny dla środowiska.

Grupy pacjentów, dla których profilaktyczne stosowanie pończoch Clotosis jest szczególnie zalecane:

- Pacjenci poddawani długim zabiegom (> 60 min.) ortopedycznym, onkologicznym, kardiochirurgicznym oraz neurologicznym
- Kobiety w okresie ciąży, przed porodem i w okresie poporodowym
- Osoby z ograniczoną mobilnością, w tym pacjenci długotrwale unieruchomieni
- Pacjenci geriatryczni, z chorobami przewlekłymi oraz z historią żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE)
- Osoby z otyłością ($BMI \geq 30 \text{ kg/m}^2$)
- Pacjenci poddawani hormonalnej terapii zastępczej lub stosujący antykoncepcję hormonalną
- Pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia, w tym z wrodzonymi lub nabytymi trombofiliami

18 mmHg



otwór rewizyjny

- monitorowanie stanu skóry i krążenia
- kontrola tętna i ocena przepływu krwi
- wentylacja stóp zmniejszająca dyskomfort pacjenta



identyfikacja rozmiaru

- kodowanie kolorystyczne

XS


S

M

L

XL

XXL

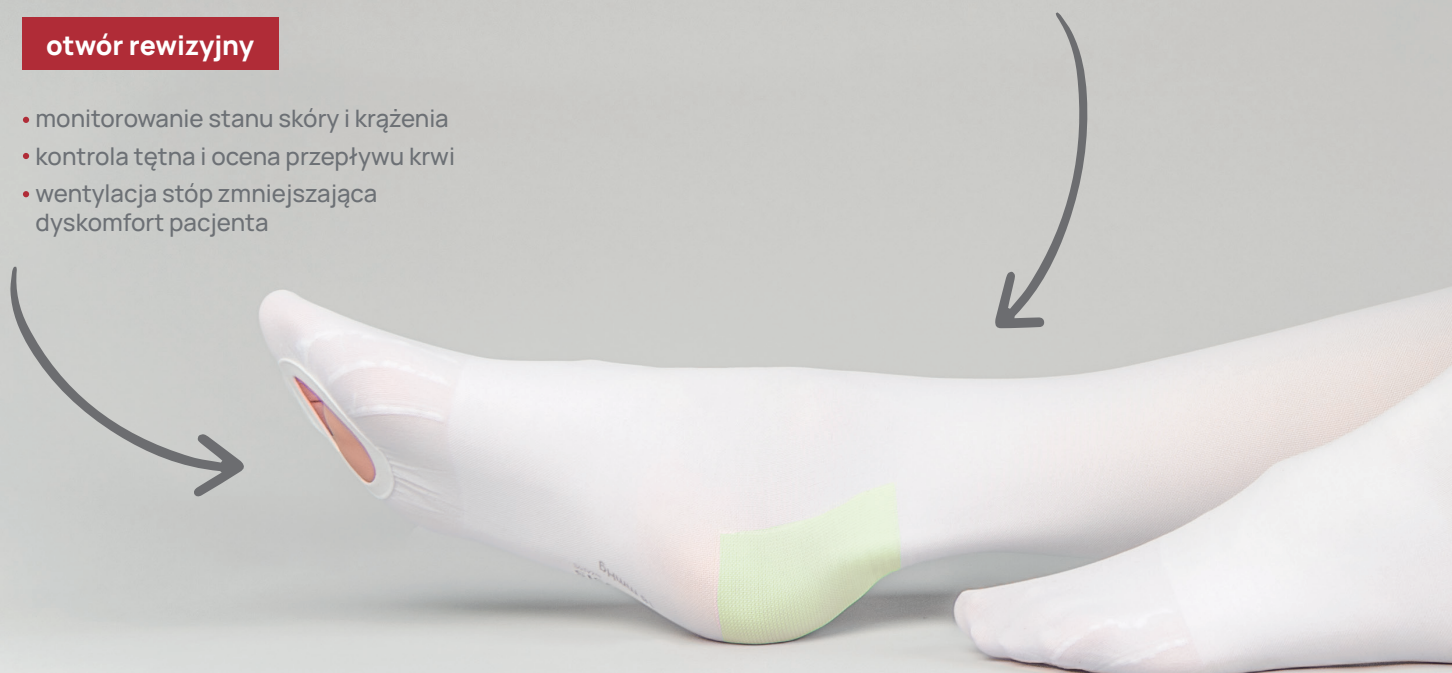

Międzynarodowe zalecenia stosowania¹ (Graduated Compression Stockings) jednoznacznie wskazują:

- Kobiety w ciąży i w okresie okołoporodowym (Klasa zalecenia 1B)
- Operacje ortopedyczne (Klasa zalecenia 1B)
- Operacje brzuszne i miednicy z umiarkowanym do wysokiego ryzyka VTE (Klasa zalecenia 1B)
- Pacjenci w okresie pooperacyjnym z unieruchomieniem (Klasa zalecenia 2B)
- Operacje ogólne z niskim ryzykiem VTE (Klasa zalecenia 2C)

¹American College of Chest Physicians (ACCP)
National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
European Society of Anaesthesiology (ESA)
World Health Organization (WHO) – wytyczne dotyczące ciąży i porodu
International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)
Australian and New Zealand Society for Vascular Surgery (ANZSVS)
Canadian Cardiovascular Society (CCS)



metka na zewnątrznej stronie

- ograniczenie ryzyka podrażnień skóry
- szybka identyfikacja rozmiaru
- łatwy dostęp do informacji:
skład materiału i instrukcje prania



napisy na lamówce


- możliwość wizualnej weryfikacji
prawidłowego dopasowania rozmiaru



Gradient kompresji

GCS (Graduated Compression Stockings) to specjalne pończochy zaprojektowane w celu poprawy krążenia krwi w nogach. Charakteryzują się stopniowanym uciskiem, który jest najsilniejszy w okolicy kostki i stopniowo maleje w kierunku uda.

Mechanizm działania pończoch uciskowych opiera się na kontrolowanym ucisku, który wspomaga przepływ krwi w kierunku serca. Przeciwdziała sile grawitacji i minimalizuje ryzyko zastoju krwi będącego przyczyną powstawania zakrzepów.

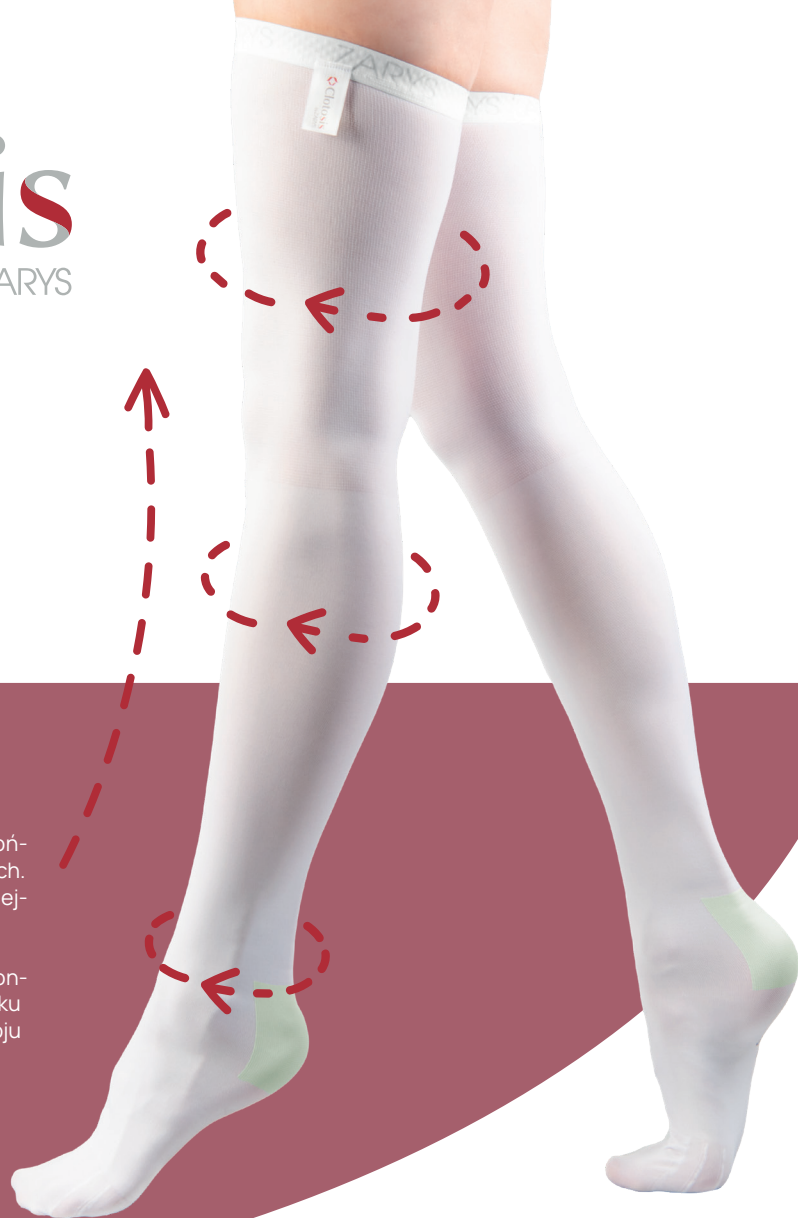

Rozmiary pończoch przeciwwzakrzepowych Clotosis

wymiary podane w centymetrach

Rozmiary	REF	cB	cC	cG
XS	CS1W18AG-XS	17.5-19.5	31-32	50-52
S	CS1W18AG-S	19.5-22.5	32-36	52-58
M	CS1W18AG-M	22.5-25.5	35-39	57-63
L	CS1W18AG-L	25.5-28.5	38-42	61-67
XL	CS1W18AG-XL	27.5-30.5	40-44	64-70
XXL	CS1W18AG-XXL	29.5-32.5	42-46	67-73

cB – obwód kostki w najszerszym miejscu

cC – obwód łydki w najszerszym miejscu

cG – obwód uda w najszerszym miejscu



**W każdym opakowaniu zbiorczym
zestaw dedykowanych taśm pomiarowych**